


PCS[®]2

Ваш выбор для плазмафереза

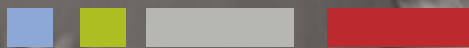

HAEMONETICS[®]
THE Blood Management Company

PCS[®]2

Аппарат для плазмафереза

Простота в использовании

- Самозагружающиеся насосы
- Автозаполнение системы растворами
- Детальные сообщения об ошибках и неисправностях
- Улучшенные оптические датчики
- Легко читаемый дисплей
- Минимальное количество сообщений тревоги

Множество функций безопасности



- Дополнительные датчики воздуха
- Датчик давления линии донора
- Датчик давления системы
- Низкое соотношение антикоагулянта
- Датчик утечки жидкости
- Наличие замка на крышке центрифуги

Варианты протоколов

- Плазма с низким содержанием тромбоцитов
- Свежезамороженная плазма
- Все протоколы – с возможностью дополнительной компенсации физраствором

Компактность

- Небольшой
- Мобильный
- Малый вес
- Идеально подходит для учреждений с ограниченным пространством и для плазмафереза в мобильных условиях

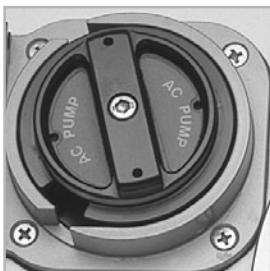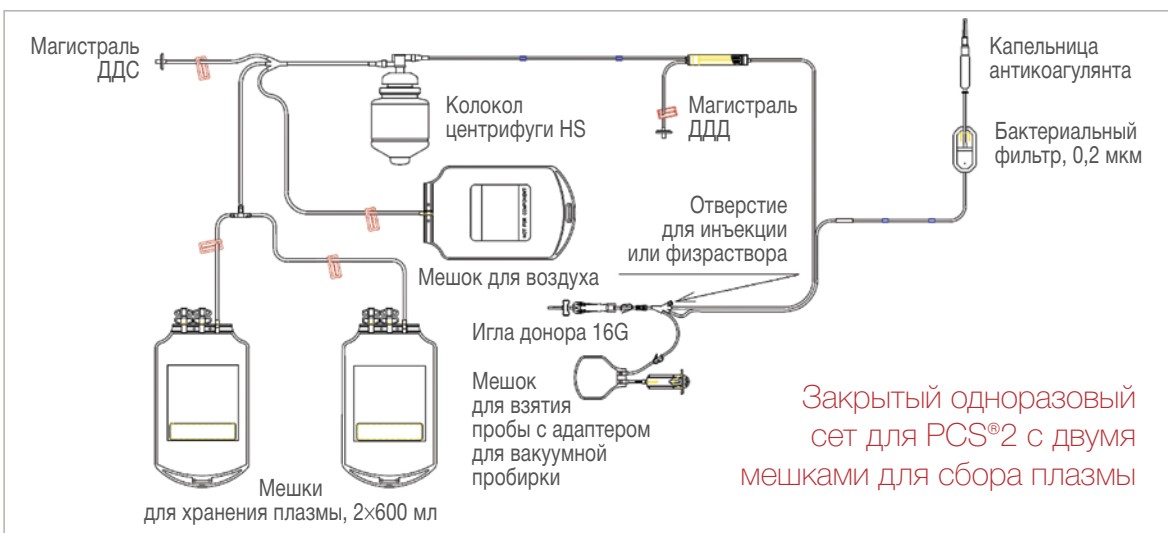

PCS[®]2 теперь доступен с EXPRESS[™]: встроенные логические функции и скорость без риска

Разрешено Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) и маркировано знаком CE

Что такое EXPRESS?

- EXPRESS является новым программным обеспечением для PCS[®]2
- Оптимизация при использовании EXPRESS позволяет сократить время сбора в среднем на 20%, или приблизительно 10 минут на одну процедуру¹
- Программное обеспечение EXPRESS повышает уровень комфорта донора
- Программное обеспечение EXPRESS обеспечивает такое же или улучшенное качество плазмы



В чем заключается оптимизация при использовании EXPRESS?

- Интеллектуальный алгоритм
 - анализирует давление в линии донора, оптимизируя тем самым скорость потока крови в течение всей процедуры
 - увеличивает скорость забора и возврата крови
 - повышает комфорт донора

Зачем устанавливать EXPRESS?

- Улучшение комфорта для доноров за счет уменьшения времени подключения донора к устройству при использовании игл 16- и 17G.
 - Использование иглы меньшего диаметра не снижает производительность
 - Повышение комфорта донора приводит к увеличению количества кадровых доноров
- Повышение производительности центра в связи с увеличением числа плазмаферезов в течение рабочего времени
 - Программное обеспечение может уменьшить число рабочих часов центра, не снижая при этом текущих объемов плазмафереза
- Улучшенное управление устройством
 - Меньшая потребность в расширении центра
 - Уменьшение нагрузки на оператора
 - Меньшее число устройств для технического обслуживания или ремонта

Как перейти на программное обеспечение EXPRESS?

Простой процесс установки, выполняемый в центре выездным техником компании Haemonetics.

Нужно ли проводить новый тренинг сотрудников?

Никакой дополнительной подготовки не требуется. Оптимизация, осуществляемая программой Express[™], понятна после установки нового программного обеспечения и не требует вмешательства оператора.

¹ Toby Simon, MD, ZLB Plasma, ASFA 2008. Может не представлять все случаи донорства.

Спецификация и информация для заказа PCS®2

Спецификации		
Только PCS®2 (закрытый)	В × Ш × Г	44 × 55 × 33 см
PCS®2 с тележкой (открытый)	В × Ш × Г	140 × 57 × 67 см
Высота стойки		67 см от верхнего яруса
Вес PCS®2 без блока связи		26,4 кг
Вес PCS®2 с блоком связи		27,4 кг
Вес тележки		13,2 кг
Электрическое напряжение		230 вольт переменного тока ± 10%
Рабочая частота		47–63 Гц
Ток		F2,5 А и 250 В
Длина питающего шнура		4,88 м

Описание	№ в списке	Единиц / блоков
Устройство PCS®2	6002-CP-220-EW	1
Закрытый сет с 2 мешками	622 HS	20
Закрытый сет с 3 мешками	623 HS	8
Линия донора	620	100
Колокол высокой очистки HS	625HS	25
Стандартный колокол	625B	25
Контейнер для сбора плазмы	690	102
Контейнер для сбора плазмы с адаптером для физраствора	692	72

Для получения более подробной информации о дополнительных расходных материалах, пожалуйста, свяжитесь с локальным торговым представителем.

Haemonetics S.A.
Московское представительство

Ольховская ул. 4Б, корпус 1
105066, Москва, Россия
www.haemonetics.com

тел. +7 495 287 65 07
факс +7 495 287 65 08

Новое программное обеспечение EXPRESS

Заказывая EXPRESS, вы получите от компании Haemonetics:

Для одного устройства:

- (1) Чип с программой Express
- (1) Наклейка на прибор Express

Для одного центра:

Детальные инструкции по модернизации
Руководство для операторов
Пакет Express Launch, содержащий:

- Настенный постер
- Документацию по программному обеспечению Express

Свяжитесь с территориальным менеджером по работе с клиентами для получения информации по обновлению и ценам.